

Intravénás katéter
elfedőző tűheggyel
és injekciós porttal

VASOFIX[®] SAFETY

ÖNAKTIVÁLÓ, TŰSZŰRÁS ELLENI VÉDELEM...

MOST MÁR MINDEN RENDBEN

„Kínzó volt a várakozás...”

Mindannyian hallottunk azokról a hátborzongató esetekről, hogyan fertőzödtek meg egészségügyi dolgozók potenciálisan végzetes betegségekkel. Ez bármilyen hétköznapi helyzetben megtörténhet – annyi is elég hozzá, hogy kiboruljon egy tűket tartalmazó vesetál, vagy hogy a beteg összeressenjen és egy véres tű megszúrjon valakit. Azután következik a szorongó várakozás a vizsgálati eredményekre: vajon pozitívnak bizonyulnak-e olyan fertőző betegségekre, mint a Hepatitis A, B, vagy C, illetve a HIV.

A tűszűrős sérülések elleni hatatosabb védelem iránti igény már sok éve hangosan megfogalmazódik. Erre az igényre választ adva a B. Braun bemutatja a Vasofix® Safety-t, az elfedődő tűhegyű intravénás katótert mozgatható szárnyal. A különleges tervezésű biztonsági kapocs a szűrőtű teljes kihúzásának pillanatában, önmagától működésbe lépve elfedi az éles tűhegyet. A Vasofix® Safety csökkenti a tűszűrős sérülések, és így a vérrel átvitt vírusfertőzések rizikóját. Most végre létezik olyan biztonságosabb eszköz, amely megvédi a tűszűrős sérülésektől, és a fertőzés véletlen átvitelétől.



Vasofix® Safety
Biztonságra tervezett.

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

- Önmagától aktiválódó kapocs technológia. Nem igényel további felhasználói ténykedést
- A véletlenszerű aktiválódás kockázata kizárt
- Megkerülhetetlen biztonsági mechanizmus
- A biztonsági kapocs a felhasználás után azonnal elfedi a tűhegyet
- A szokványos intravénás katótereknél megszokottal azonos szűrési technika
- A gyógyszerek higiénikus beadása külön tű használata, és a tűszűrős sérülés kockázata nélkül



... JÓL BEVÁLT KEZELÉSI TULAJDONSÁGOK


A MEGSZOKOTT HASZNÁLAT

Az új Vasofix® Safety használata során Ön ugyanazt az ismerős szűrési technikát alkalmazza, mint amelyet a hagyományos Vasofix® intravénás katétereknél már megszokott. A használat módja mit sem változott, tehát nem befolyásolja a megszokott napi rutint és a felhasználóknak nem kell új fogásokat elsajátítaniuk. A közvetett költségek tekintetében ez is olyan fontos szempont, amely megkönnyíti a beszerzési döntéseket.




SZÜRÁSI JELLEMZŐK

Az elektronikusan csiszolt, éles tűhegy és az atraumatikus kialakítású katétercsúcson együttesen könnyed – a beteg számára csaknem fájdalommentes – szűrést biztosítanak.

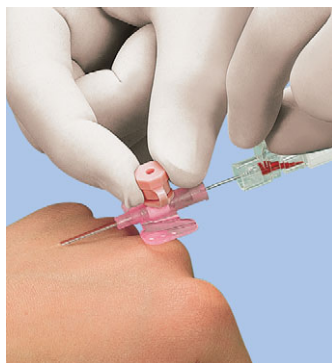

KETTŐS KONTROLL

A katéter átlátszó anyaga éppen úgy segíti a katéter kellő helyzetének megbízható igazolását, mint a kissé visszahúzandó tű végén helyet foglaló, szivárgásmentes hidrofób membránban végződő, teljesen átlátszó visszáraamlási kamra.

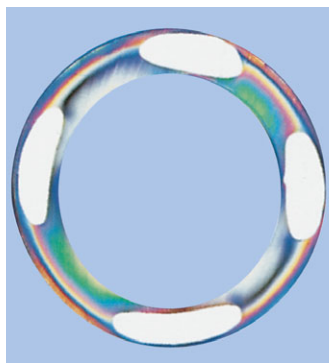

RTG-ÁRNYÉKOT ADÓ KATÉTER

Az átlátszó katéter falába ágyazott négy, RTG-árnyékot adó csík segíti a véletlenül levágva beúszó katéterdarab helyzetének meghatározását. Mérsékli a beteg komplikációit és a kórház felelősségét.

A TERMÉK
LATEXMENTES!



INJEKCIÓS PORT

Az injekciók gyors és könnyű beadása lehetővé teszi, hogy a beadott hatóanyag gyorsan kifejthesse hatását.





TERMÉKVÁLASZTÉK

VASOFIX® SAFETY

Termék	Méret	Katéter		Átfolyási sebesség ml/min	Katalógusszám		Katalógusszám Mandrin
		hossz/inch	ø/mm		FEP	PUR	
					Katéter anyaga		
					FEP	PUR	
	24G	3/4"	0.7 x 19	22	-	4269071S-01	-
	22G	1"	0.9 x 25	36	4268091S-01	4269098S-01	4215095
	20G	1"	1.1 x 25	65	-	4269217S-01	4215117
	20G	1 1/4"	1.1 x 33	61	4268113S-01	4269110S-01	4219104
	18G	1 1/4"	1.3 x 33	103	4268334S-01	4269330S-01	4219139
	18G	1 3/4"	1.3 x 45	96	4268130S-01	-	4219120
	17G	1 3/4"	1.5 x 45	128	4268156S-01	-	4215150
	16G	2"	1.7 x 50	196	4268172S-01	-	4219171
14G	2"	2.2 x 50	343	4268210S-01	-	4219201	
Eladási egység: 50 darab/doboz							ISO 10555-1/5

VASOFIX® BRAUNÜLE® / VASOFIX® CERTO

Termék	Méret	Katéter		Átfolyási sebesség ml/min	Katalógusszám		Katalógusszám Mandrin
		hossz/inch	ø/mm		Vasofix® Braunüle	Vasofix® Certo	
					Katéter anyaga		
					FEP	PUR	
	24G	3/4"	0.7 x 19	22	-	4269071	-
	22G	1"	0.9 x 25	36	4268091B	4269098	4215095
	20G	1"	1.1 x 25	65	-	4269217	4215117
	20G	1 1/4"	1.1 x 33	61	4268113B	4269110	4219104
	18G	1 1/4"	1.3 x 33	103	4268334B	4269330	4219139
	18G	1 3/4"	1.3 x 45	96	4268130B	-	4219120
	17G	1 3/4"	1.5 x 45	128	4268156B	-	4215150
	16G	2"	1.7 x 50	196	4268172B	-	4219171
14G	2"	2.2 x 50	343	4268210B	-	4219201	
Eladási egység: 50 darab/doboz							ISO 10555-1/5

B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest, Felhévizi u. 5.
 Tel.: +36 (1) 346 9700 | Fax: +36 (1) 438 4900
www.bbraun.hu | www.facebook.com/BBraunHU