



VIZELETMÉRŐ RENDSZEREK

UREOFIX® 500 CLASSIC

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Csökkentett fertőzésveszély
- Precíz leolvashatóság
- Könnyű és biztonságos kezelés
- Biztonságos mintavételezés, mellyel elkerülhetőek a tűszúrásos balesetek




Vizeletáramlás irányának könnyű meghatározása

ÚJ

Tű nélküli mintavételezési port

Megfelelve a legújabb betegbiztonsági előírásoknak, az Ureofix 500 Classic termékek teljes köre a csatlakozóknál beépített, tű nélküli mintavételezési funkcióval van ellátva.

A mintavételezési port kompatibilis tű nélküli fecskendőkkel

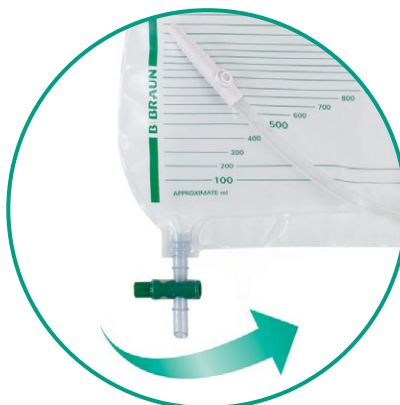


A kivezető nyílás vízszintes helyzetben rögzíthető

TERMÉKJELLEMZŐK



Az Ureofix® 500 Classic egy jól ismert vizeletmérő rendszer, mely speciálisan a napi diurézis- és vizeletvizsgálathoz lett kifejlesztve, lehetővé téve a vizelet mennyiségének pontos meghatározását is. A három merev kamra teljes mérési térfogata 500 ml. Az új generációs termék előnyei az új technológiákból adódnak és megfelel a B. Braun környezeti standardjainak is.


DEHP-MENTES
LATEXMENTES

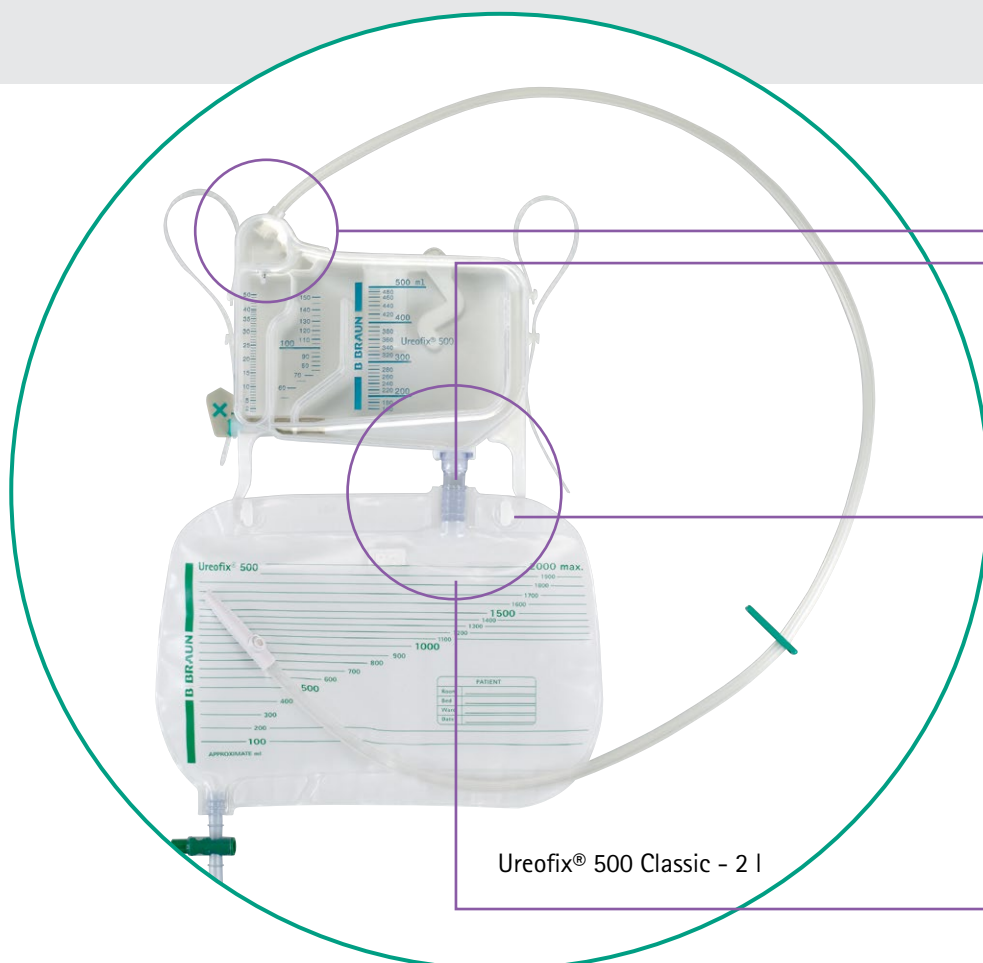

Ureofix® 500 Classic - 2 l


A felhasználó számára előnyös,
előre felszerelt 2 literes zsák

Cseppkamra STOP

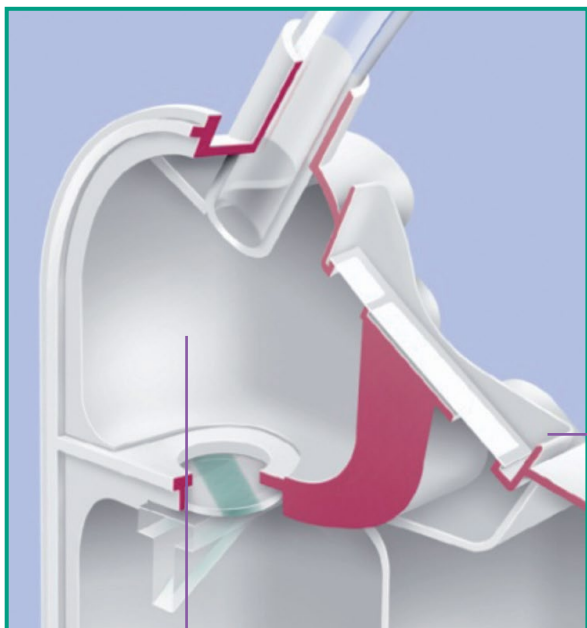


Ureofix® 500 Classic - 2 l

- Megelőzi a baktériumok retrográd vándorlását
- Beépített visszafolyásgátló elleni szelep: megelőzi a vizelet csővezetékekbe történő visszaáramlását
- A levegőztető szűrő biztosítja a nyomáskiegyenlítést

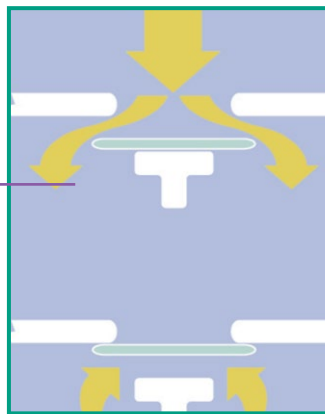


Visszáramlás-gátló szelep

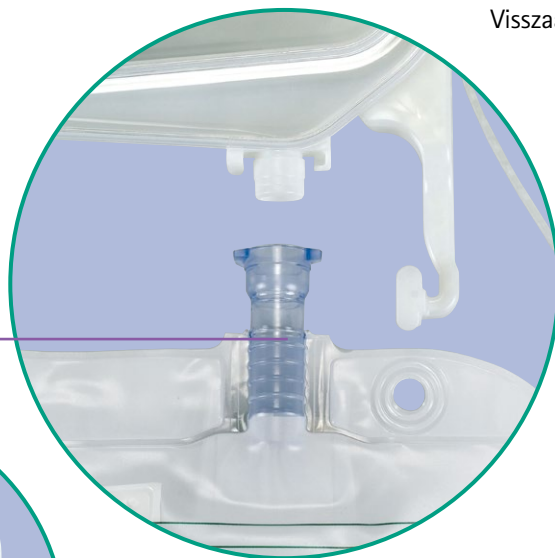


Egyszerűen illeszthető bajonett csatlakozó

- Könnyebb és biztonságos, csöpögésmentes csatlakoztatás
- Elérhető 1.5 l / 2 l és 3.5 l-es kiserelésben is

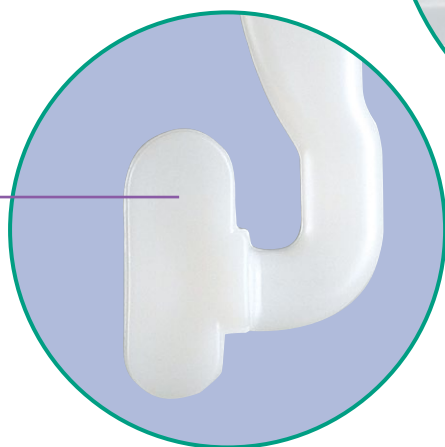

Új típusú, biztonságosabb rögzítést lehetővé tevő akasztófül

Egyszerű és biztonságos gyűjtőzsák felfüggesztés

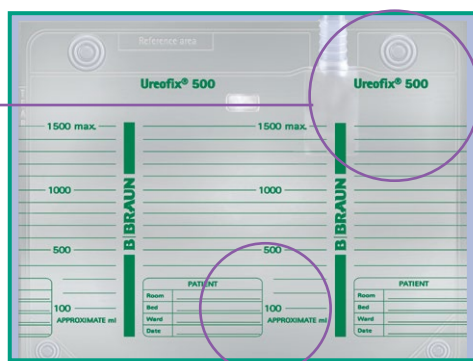

Visszáramlás-gátló szeleppel és bemeneti levegőzőszeleppel

Szorítókapcsok használata nem szükséges
Elérhető 1.5 l / 2 l és 3.5 l-es kiserelésben is


Új kialakítású zsák:
egyszerűbb beteg azonosítást lehetővé tevő jelöléssel

TERMÉKJELLEMZŐK

Ureofix® 500 Classic rögzítési megoldások széles kínálata, melyek minden típusú ágyra, rögzítési pontra alkalmazhatók


2 beépített rögzítőelem

- A tartály hátsó részére előre felszerelt horog (opcionális eltávolítható)
- A tartályra szerelt 2 db rögzítőszalag


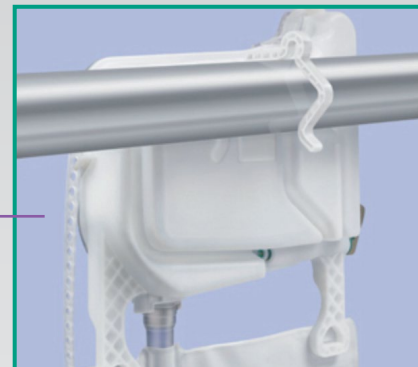


2 további rögzítési lehetőség




- Rögzítőbilincs

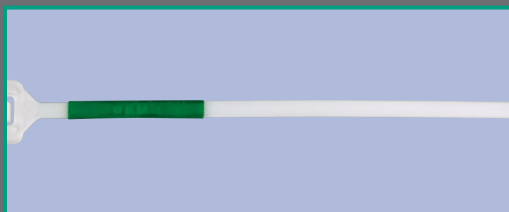

- Eltávolítható rögzítőlap

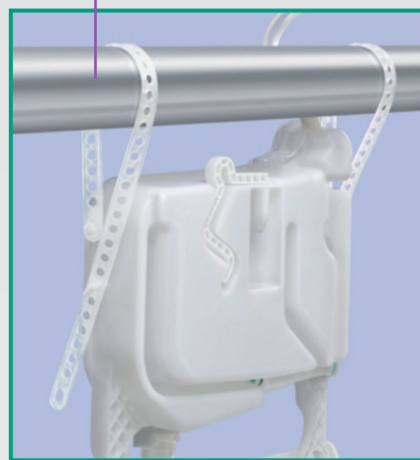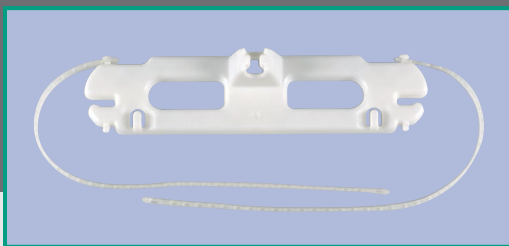

Mini rögzítési útmutató

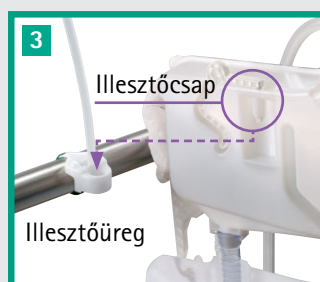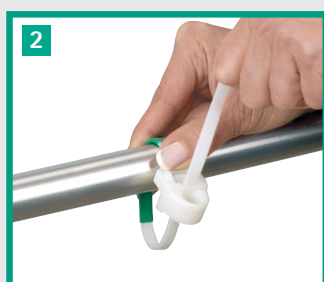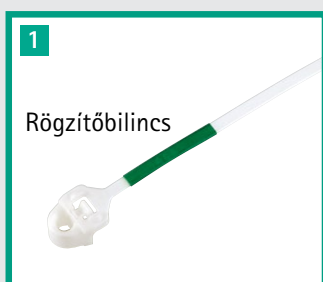

TERMÉKLEÍRÁS ÉS CIKKSZÁMOK

UREOFIX® 500 CLASSIC SZETT

Cikkszámok	Termékleírás	Csővezeték hossza (cm)	Darab/doboz
Zárt zsákkal			
441 7910	Ureofix® 500 Classic cserélhető zsákkal 1,5 l	120	10
441 7920	Ureofix® 500 Classic cserélhető zsákkal 1,5 l	170	10
441 7960	Ureofix® 500 Classic cserélhető zsákkal 3,5 l	170	10
Alsó ürítésű zsákkal			
441 7930	Ureofix® 500 Classic előre felszerelt üríthető zsákkal 2 l	120	10
441 7940	Ureofix® 500 Classic előre felszerelt üríthető zsákkal 2 l	170	10
441 7950	Ureofix® 500 Classic előre felszerelt üríthető zsákkal 2 l	200	10

UREOFIX® 500 CLASSIC CSEREZSÁKOK

Cikkszámok	Termékleírás	Méret	Darab/doboz
441 7535	Ureofix® 500 Classic zárt zsák	1.5 l	100
441 7543	Ureofix® 500 Classic zárt zsák	3.5 l	100
441 7551	Ureofix® 500 Classic üríthető zsák	2 l	100

UREOFIX® 500 CLASSIC KIEGÉSZÍTŐK

Cikkszámok	Termékleírás	Darab/doboz
441 7780	Rögzítőlap	25
441 7755	Rögzítőszalag	10*10

EO STERILIZÁCIÓS ELJÁRÁS

B. Braun Trading Kft. | 1023 Budapest, Felhíví u. 5.
Tel.: +36 (1) 346 9700 | Fax: +36 (1) 438 4900
www.bbraun.hu | www.facebook.com/BBraunHU/